


「デンタルフラッシュ 4.0」バージョンアップガイド



- バージョンアップの際は、ネットワーク内の全ての「デンタルフラッシュ」を終了し、USB キーは抜いてください。
- 「デンタルフラッシュ 4.0」の対応 OS は Windows7 / 8 / 8.1 / 10 になります。以下の操作は全て対応 OS のパソコンで行ってください。
- 「デンタルフラッシュ」が入っていないパソコンにインストールする場合、手順 ① は「次へ」ボタンでスキップし、手順 ② へ進んでください。
- 「デンタルフラッシュ 3.1」スタンドアロン版をご利用の場合、必ず先に USB キーを接続したまま、「スタート」→「デンタルフラッシュ 3.1」→「アンインストール」を実行してから以下の手順に進んでください。


1 登録データのバックアップと旧バージョンのアンインストール

1. インストールメディア (DVD) から、VupSetup.exe を実行します。

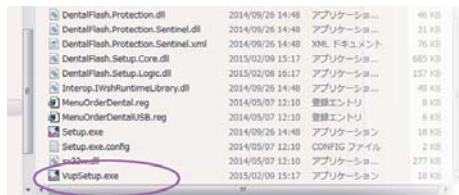

※実行のダイアログが立ち上がらない場合は、フォルダを開き VupSetup.exe をダブルクリックしてください。


2. 登録していた症例写真やテキストのバックアップをします。

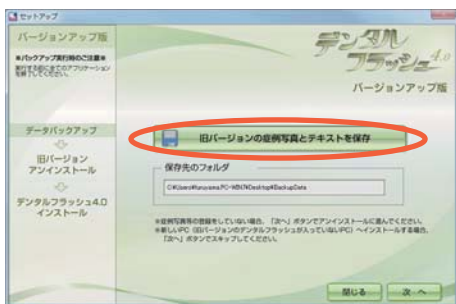

「旧バージョンの症例写真とテキストを保存」ボタンを押してください。デスクトップにデータが保存されたら次の画面に移ります。

※旧バージョンのデンタルフラッシュが入っていない場合、バックアップするデータが無い場合は「次へ」ボタンでスキップしてください。

3. 旧バージョンのアンインストールを行います。

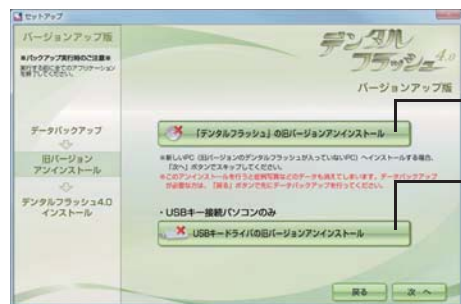


●旧バージョンのデンタルフラッシュをアンインストールします。

●旧バージョンの USB キードライバをアンインストールします。

アンインストール後「PC を再起動してください」と出ますが、ここでは再起動せず、「OK」ボタンを押し、「次へ」ボタンを押し次の手順に進んでください。

※デンタルフラッシュや USB キードライバが入っていないパソコンにインストールする場合は、「次へ」ボタンでスキップしてください。

2 ソフトのインストール

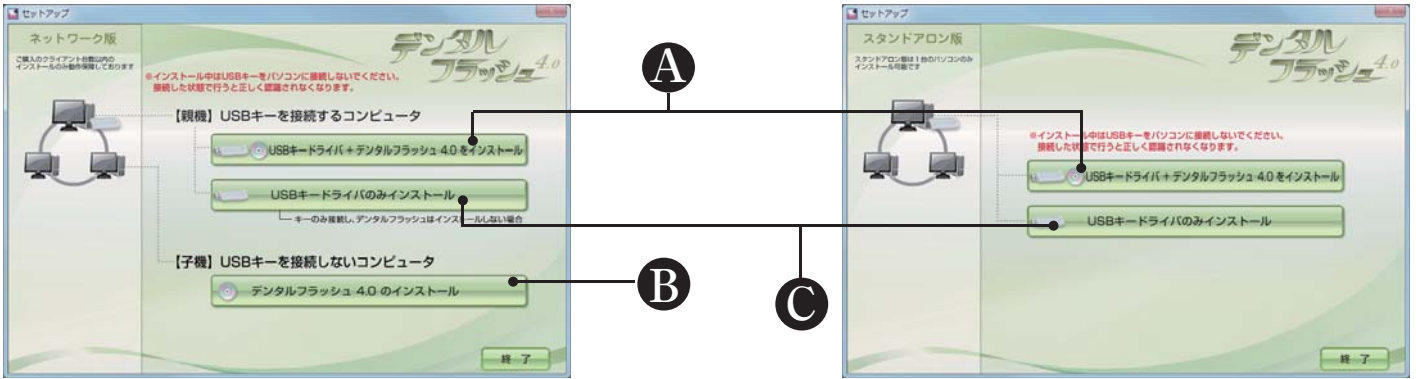


A 「デンタルフラッシュ 4.0」と「USB キードライバ」をまとめてインストールします。

B 「デンタルフラッシュ 4.0」のみをインストールします。

C 「USB キードライバ」のみをインストールします。


※USB キーを接続しているパソコンにのみ USB キードライバが必要です。

1

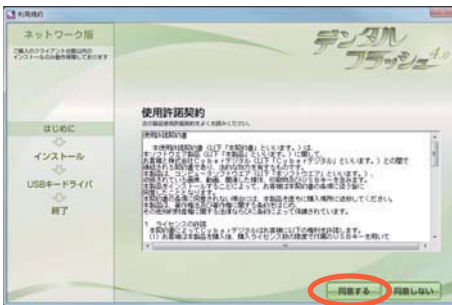


A または **B** のボタンを押すと「使用許諾契約」の画面に移行します。内容を確認し、「同意する」ボタンを押してください。

2

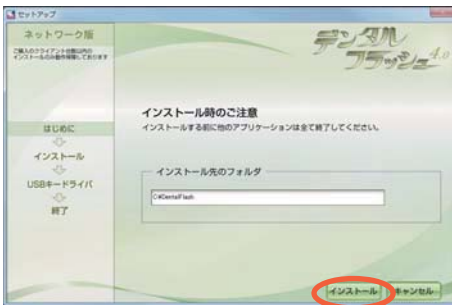


インストールする場所を確認し、
[インストール] ボタンを押します。

3

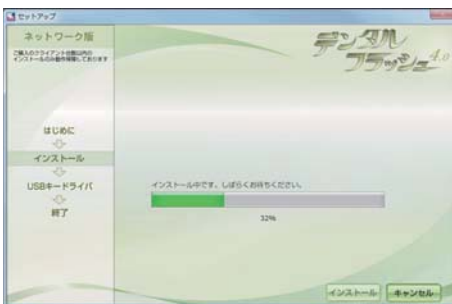

インストールが開始されます。


4

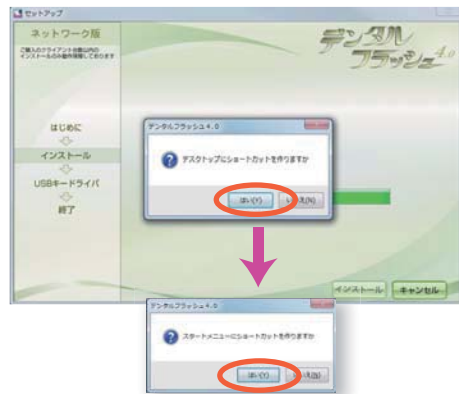

インストールが 100% になると、ショートカットアイコンを作成の確認ダイアログが表示されます。作成する場合「はい」を押してください。

引き続き、スタートメニューにショートカットを作成するダイアログが表示されます。作成する場合「はい」を押してください。

5

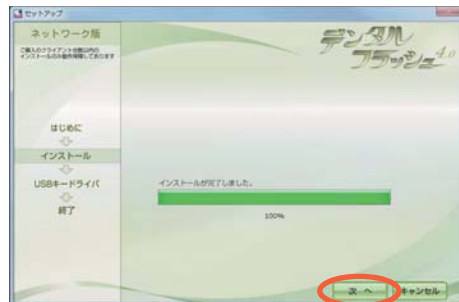


インストール完了の画面が表示されましたら、USB キードライバもインストールする場合は「次へ」を押してください。


「デンタルフラッシュ 4.0」のみのインストールの場合、終了画面に移りますので、[終了] ボタンを押してください。



3 USB キードライバのインストール (USB キー接続 PC のみ)

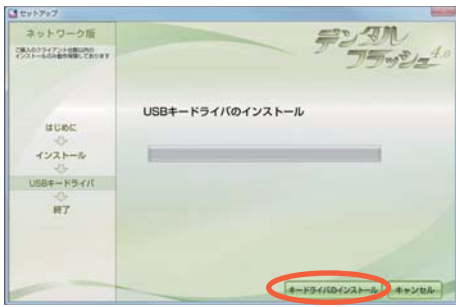


[キードライバのインストール] ボタンを押すとインストールが開始されます。

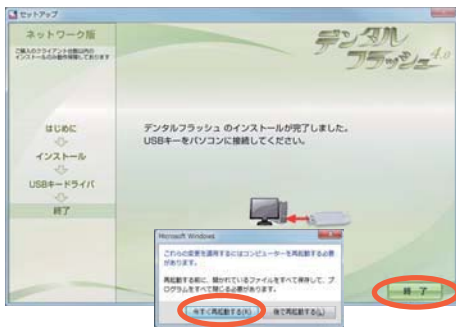

インストールが終了すると、終了画面が表示されます。
[終了] ボタンで画面を閉じると、再起動の確認ダイアログが表示されますので、必ず再起動してください。


4 USB キーのバージョンアップ

1. パソコンに「メモリスティック」を接続します。

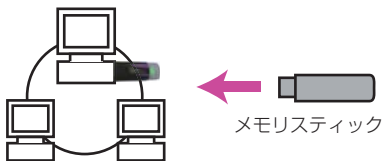


- 必ず USB キードライバの入っているパソコンに USB キーを接続して行ってください。
- 「メモリスティック」はネットワーク内のどのパソコンに接続してもかまいません。
- USB キーのバージョンアップはネットワーク内の1台のパソコンで1回実行していただくだけで完了します。全てのパソコンで行う必要はございません。

2. 「メモリスティック」内のプログラムを実行します。

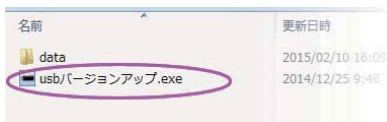

「メモリスティック」内にある「usbバージョンアップ」をダブルクリックします。

3. USB キーのバージョンアップを行います。

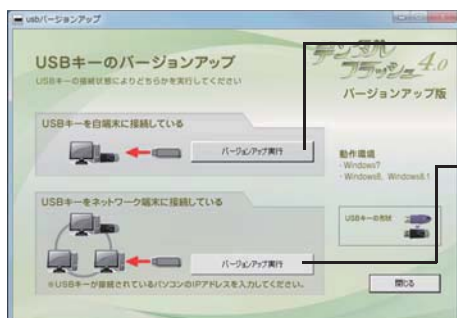

● USB キーが自端末に接続されている場合

上の「バージョンアップ実行」ボタンを押します。


● USB キーが他のパソコンに接続されている場合

下の「バージョンアップ実行」ボタンを押します。
USB キーが接続されているパソコンの IP アドレスを入力します。



正常にバージョンアップが完了すると「処理を完了しました。」というメッセージが表示されますので、「OK」を押します。

4. 「メモリスティック」をパソコンから取り外します。

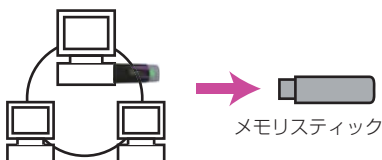

- 「USBバージョンアップ」でのバージョンアップは1回のみ実行可能です。

■ よくある質問（バージョンアップ編）

Q 手順 **①** でバックアップした旧バージョンのデータは、自動的に「デンタルフラッシュ 4.0」に反映されますか？

A いいえ。「デンタルフラッシュ 4.0」はメニュー数や写真登録パネル数が増えた仕様により、バックアップデータをそのまま反映することは出来ません。
お手数ですが、デスクトップに保存されたデータを、操作マニュアル P25 ～を参照して、改めて登録をお願いします。
尚、1 台のパソコンに登録すれば、他のパソコンには設定情報のコピー（操作マニュアル P16 ～参照）で登録情報がコピーできます。

Q 旧バージョンを WindowsXP で利用していましたが、Windows7 / 8 / 8.1 / 10 に入れ替えたので、「デンタルフラッシュ 4.0」バージョンアップ版を購入しました。バージョンアップの手順を教えてください。

A 手順 **①** は「次へ」ボタンでスキップし、手順 **②** からインストールしてください。
登録していた症例写真等は、旧バージョンの [設定]→[バックアップ] から外部メモリ等に保存し、お手数ですが改めて症例登録をお願い致します。

Q パソコンを入れ替えたので、「デンタルフラッシュ 4.0」を再インストールしたいのですが、バージョンアップ版と同じ DVD でインストールしていいですか？

A はい。手順 **①** は「次へ」ボタンでスキップし、手順 **②** へ進んでください。登録した症例写真等は、他のパソコンから設定情報のコピー機能を使うか、古いパソコンからバックアップして外部メモリ等に保存し、新しいパソコンでリストアしてください。（操作マニュアル P29 参照）
※スタンドアロン版をご利用の場合、必ず入れ替え前のパソコンで、USB キーを接続したまま、「スタート」→「デンタルフラッシュ 4.0」→「アンインストール」を実行してください。

Q スタンドアロン版を利用していました。パソコンを入れ替えたので、新しいパソコンに「デンタルフラッシュ 4.0」を入れましたが、“接続されている「USB キー」が違うため***”とエラーが表示され起動できません。

A 「デンタルフラッシュ 3.1」「デンタルフラッシュ 4.0」のスタンドアロン版は、USB キーにご利用のパソコンのハードウェア情報が書き込まれる為、USB キーを差し替えるだけではご利用いただけません。入れ替え前のパソコンで、必ず USB キーを接続したまま、「スタート」→「デンタルフラッシュ ***」→「アンインストール」を実行してください。
※入れ替え前のパソコンでアンインストールができない場合、弊社にて USB キーを交換しますが、有償 (5,000 円 + 消費税) になりますので、ご了承ください。

■ 動作環境

OS	Windows7 (32bit・64bit) Windows8 (32bit・64bit) Windows8.1 (32bit・64bit) Windows10 (32bit・64bit)
CPU	2 コア以上の 32bit または 64bit プロセッサ
メモリ	単独起動の場合 2GB 以上（他のソフトと同時起動の場合は4GB以上推奨）
モニター	1024 × 768 以上の Windows 対応ディスプレイ 24bitカラー以上（推奨32bitカラー）
ハードディスク	インストール用として C ドライブに 3GB 以上の空き容量 （アニメキャプチャ保存用空き容量は別途必要）
ドライブ	DVD-ROM が読込可能なドライブ（インストール時に必要）
ポート	USB ポート
その他	印刷機能を使用する際は別途プリンターをご用意ください。 PC 上でトラブルシューティングをご覧になれる場合は、Adobe Reader 等 PDF 閲覧ソフトが必要になります。

※ネットワーク版はネットワークが正しく接続されている場合に限り有効です。

※Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。