

インストールガイド

この度は、「デンタルフラッシュ3」をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用およびインストールを開始する前に製品のパッケージ内容をご確認ください。万が一、内容物に不足、不良がございましたら弊社までお問い合わせください。

● インストールガイド (本紙)	1
● 操作マニュアル	1
● トラブルシューティング	1
● USB キー	1
● CD-ROM	1
● ユーザー登録証	1

■動作環境

OS	WindowsXP WindowsVista
Web ブラウザ	Microsoft Internet Explorer (6 以上)
メモリ	512MB 以上 (推奨 1 GB 以上) Vista の場合は 1 GB 以上
CPU	Pentium 1GHz 以上
モニタ	解像度 1024 × 768 24bit カラー以上 (推奨 32bit カラー)
ハードディスク	インストール用として 2 GB 以上の空き容量 (アニメキャプチャの保存用は別途必要)
その他	USB ポート (USB プロテクトキーを接続するコンピュータ)
その他 (印刷編集)	アニメキャプチャを印刷する場合は別途プリンターをご用意 ください。

※ネットワーク版はネットワークが正しく接続されている場合に限り有効です。

※動作環境は「デンタルフラッシュ3」を単体で起動する場合です。他のソフトと同時起動する場合は推奨以上が必要です。

※Windows および Internet Explorer は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※Pentium は Intel Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※Flash は、Adobe の商標または登録商標です。

インストールガイド

インストール画面




- A** 「デンタルフラッシュ 3」をインストールします。
- B** 「USB キーのドライバ」をインストールします。
(USB キーを接続するコンピュータのみ必要です)
- C** 必要な場合のみ「Flash プレイヤー」をインストールします。
(アニメーションを表示するためのプレイヤーです)

インストール時のご注意

- ※ CD-ROM のデータ面を指で触れないようにお願いします。
(指紋が付くとエラーが起きる場合があります)
- ※ ログイン名に2バイト文字 (漢字、かな) は使用しないでください。
- ※ インストールは「管理者権限」で行ってください。
- ※ インストールはすべてのアプリケーションを終了してから行ってください。
- ※ USB キーは必ず「USB キードライバ」のインストール完了後、コンピュータに接続してください。

ネットワーク版構成例

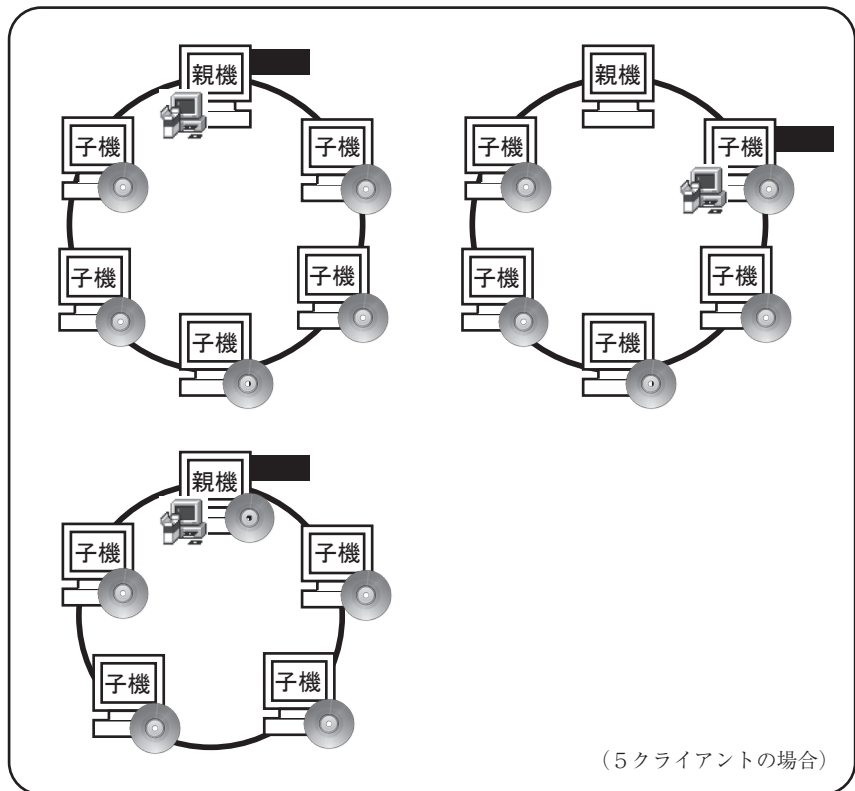

 デンタルフラッシュ3  USB キー  USB キードライバ

- ※ネットワーク版はネットワークが正しく接続されていることを確認してください。
- ※「USB キー」はネットワーク内のどのパソコンに接続していただいてもかまいません。
- ※デンタルフラッシュ起動中は USB キーをパソコンに接続した状態で使用してください。


A

「デンタルフラッシュ3」のインストール

※インストール画面が自動で表示されない場合、CD-ROM内の
【setup.exe】をダブルクリックしてください。

DISC 1


1

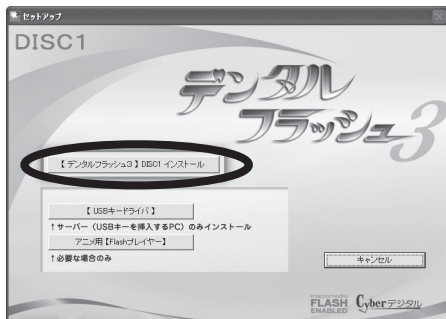

DISC1 の CD-ROM をドライブに入れます。

Top 画面が表示されたら、
[【デンタルフラッシュ3】
DISC1 インストール] ボタン
をクリックします。

2

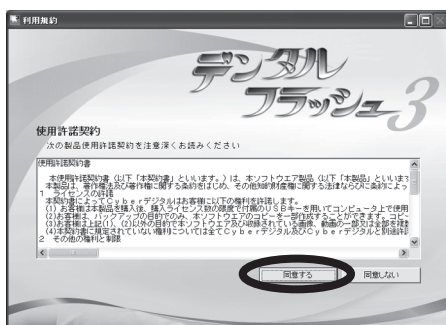


「使用許諾契約」を確認し、
[同意する] ボタンをクリッ
クします。

3




インストールする場所を確認
し、[次へ] ボタンをクリッ
クします。

4

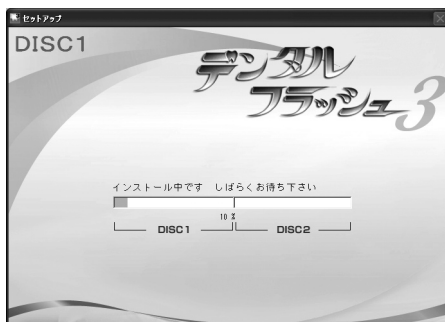


インストールが開始されます。
途中、インストール作業が止まっているように見える場合がありますが、しばらくそのままお待ちください。

5

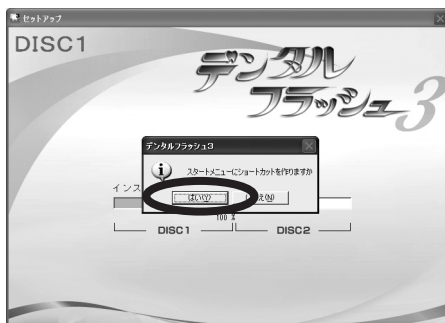

スタートメニューにショートカットアイコンを作成する場合は[はい]をクリックします。

6

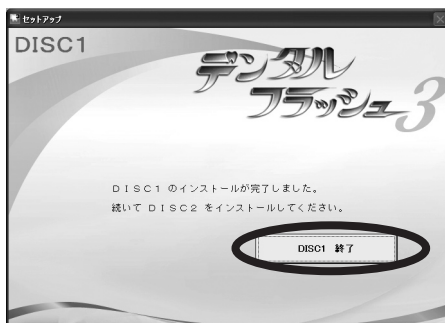


DISC1 のインストールが完了すると、完了画面が表示されますので [DISC1 終了] ボタンをクリックします。

DISC1 の CD-ROM を取り出します。

「デンタルフラッシュ3」のインストール

DISC 2


1

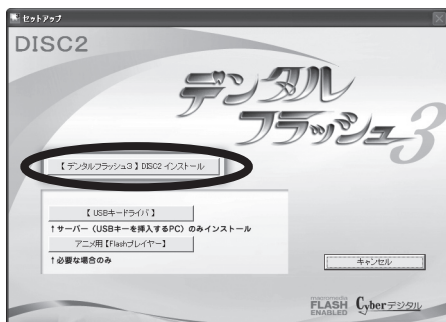

DISC 2 の CD-ROM をドライブに入れます。


Top 画面が表示されたら、[【デンタルフラッシュ3】DISC2 インストール] ボタンをクリックします。

2

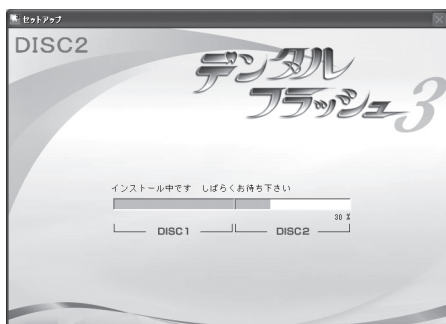

DISC2 のインストールが開始されます。


3

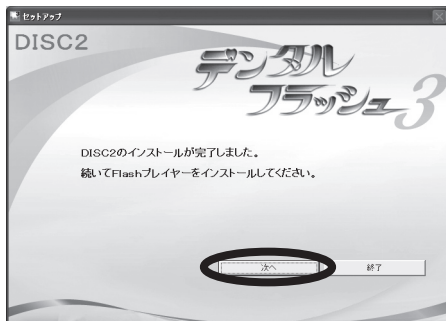

[次へ] ボタンをクリックします。

(最新の Flash プレイヤー [Version10] のインストールを行います。)

4

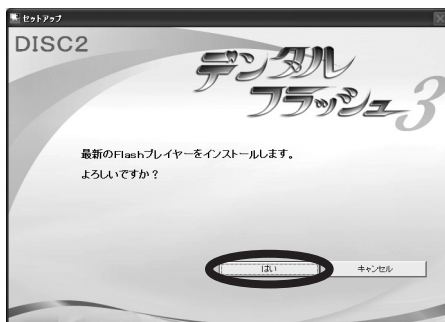

よろしければ[次へ]ボタンをクリックします。

5



Flash プレイヤーのインストールが完了したら[閉じる]ボタンをクリックします。

Flash プレイヤーのインストールが正常に完了できない場合は旧バージョンの Flash プレイヤーをアンインストール後、再度インストールを行ってください。(P11 参照)

6



DISC2のインストールが完了すると、Top 画面が表示されますので[DISC2 終了]ボタンをクリックします。

DISC2 の CD-ROM を取り出します。

B


「USB キードライバ」のインストール



※ USB キードライバはサーバー等、USB キーを接続するパソコンのみ必要です。


※インストール中は USB キーをパソコンに接続しないでください。

1

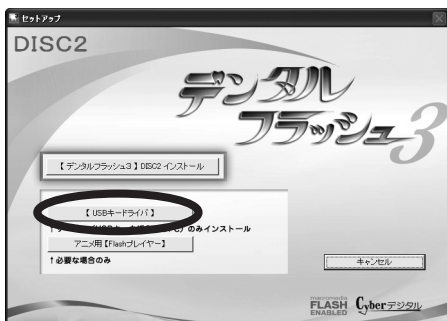


「USB キードライバ」ボタンをクリックします。

2

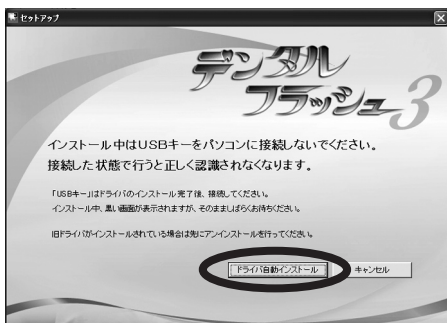

「ドライバ自動インストール」ボタンをクリックします。


3

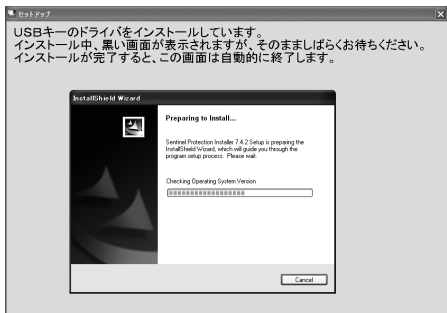

ドライバの自動インストールを行います。

(インストール中黒い画面が表示されますが、そのまましばらくお待ちください。インストールが完了すると自動的に画面が終了します。)

◆ USB キーの形状

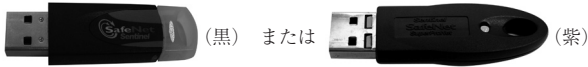

※ USB キー接続 PC を変更する場合

- 1 : 変更後のパソコンに「USB キードライバ」をインストールします。
- 2 : USB キーを差し換えます。
(元のパソコンの「USB キードライバ」はそのままでも問題ございません。)

※ ネットワーク環境を変更した場合

ネットワーク環境を変更した場合、USB キーを正しく認識しなくなる場合があります。

その場合は「USB キードライバ」をアンインストール後、再度「USB キードライバ」をインストールしてください。

◆ 「USB キードライバ」をアンインストールする方法



【WindowsXP】

スタートボタン→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」から
Sentinel Protection Installer を削除します。




【WindowsVista】

スタートボタン→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」または「プログラムのアンインストール」から
Sentinel Protection Installer をアンインストールします。

C**必要な場合のみ「Flash プレイヤー」のインストール**


アニメーションを表示するための最新の Flash プレイヤーです。
通常は [DISC2] インストールの最後に画面が表示されます。正常に
インストールできなかった場合のみ使用します。

1

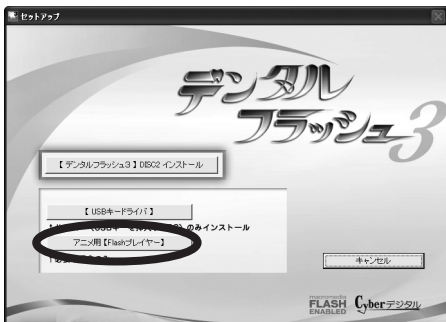

[アニメ用Flashプレイヤー]
ボタンをクリックします。

2

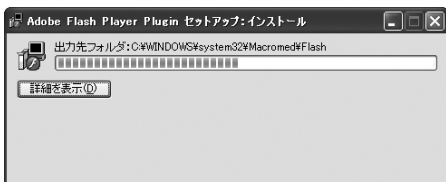

インストール中です。

3



インストールが完了したら、
[閉じる] ボタンをクリックします。

※ Flash プレイヤーが正常にインストールできない場合

アプリケーションを全て終了し、パソコンにインストールされている旧バージョンの「Flashプレイヤー」をアンインストール後、再度 「Flashプレイヤー」のインストールを行ってください。

◆ 「Flash プレイヤー」をアンインストールする方法



【WindowsXP】

スタートボタン→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」から

Flash Player または
Adobe Flash Player を削除します。



【WindowsVista】

スタートボタン→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」または「プログラムのアンインストール」から

Flash Player または
Adobe Flash Player をアンインストールします。

上記の方法で正常にインストールできない場合は、お使いのパソコンの環境によるものです。

アドビの HP をご確認ください。

<http://www.adobe.com/jp/support/flashplayer/>

使用許諾契約書

本使用許諾契約書（以下「本契約書」といいます。）は、ソフトウェア製品「デンタルフラッシュ」（以下「本製品」といいます。）に関して、お客様と株式会社Cyberデジタル（以下「Cyberデジタル」といいます。）との間で締結される契約書であり、法的な効力を有するものです。本製品は、コンピュータソフトウェア（以下「本ソフトウェア」といいます。）、収録されている画像、動画、関連した媒体、印刷物及びUSBキーを含みます。本製品をインストールすることによって、お客様は本契約書の条項に従う旨に同意したこととなります。本契約書の条項に同意されない場合には、CD-ROMの包装を開封せず、パッケージを直ちに購入場所に返却してください。CD-ROMの包装を開封された場合には、お客様は、本契約書に同意頂いたものとみなします。本製品は、著作権法及び著作権に関する条約をはじめ、その他知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。

1 ライセンスの許諾 本契約書によってCyberデジタルはお客様に以下の権利を許諾します。

- (1) お客様は本製品を購入後、購入ライセンス数の限度で付属のUSBキーを用いてコンピュータ上で使用することができます。購入ライセンス数についてはパッケージ又はユーザー登録用紙に記載されています。
- (2) お客様は、バックアップの目的でのみ、本ソフトウェアのコピーを一部作成することができます。コピーには本ソフトウェアに含まれている全ての著作権表示を必ず含んでコピーしてください。
- (3) お客様は上記(1)、(2)以外の目的で本ソフトウェア及び収録されている画像、動画の一部又は全部を複製し、画面キャプチャ等で二次利用することはできません。

2 その他の権利と制限

(1) 移管

お客様は、移管前のコンピュータから本製品を消去した上で、お客様が所有する他のコンピュータに移管して使用することができます。

(2) 改変等の禁止

お客様は、本製品への修正、追加及び本製品を逆アセンブル、逆コンパイル等リパースエンジニアリングを行うことはできません。

(3) レンタル及び譲渡等の禁止

お客様は、本ソフトウェア、収録されている画像、動画等の本製品をレンタル、リース、貸与、譲渡することはできません。

(4) ホームページでの使用の禁止

本製品に収録されている画像、又は動画をホームページ（Webサイト）で使用する等公衆に送信してはならず、公衆に送信可能な状態にしてはけません。

(5) 損害賠償

お客様が上記(2)から(4)に違反した場合、Cyberデジタルはお客様に対し、お客様が本製品の一部又は全部を第三者に提供した回数に本製品の販売価格を乗じた額に相当する金額を損害賠償として請求できるものとします。

3 解除 お客様が本契約書に記載している事項に反した場合、Cyberデジタルは何らの催告を要せず本契約を解除することができます。本契約が解除された場合お客様は本製品及び本製品の複製物（一部複製も含む）を全て廃棄しなければなりません。

4 保証 Cyberデジタルは、本ソフトウェアが付属のマニュアルに従った動作を行わない場合又は本ソフトウェアに物理的不具合又は瑕疵が存在する場合、お買い上げ後一年間に限り、Cyberデジタルの選択により、交換又は補修のいずれかを行うこととします。

5 免責 お客様が本製品を使用することによって発生した直接的・間接的な損害についてCyberデジタルは一切の責任を負わないものとします。