

「neodental-i4」バージョンアップガイド



- バージョンアップの際は、ネットワーク内の全ての「NEO DENTALi」を終了し、USB キーは抜いてください。
- 「neodental-i4」の対応 OS は Windows7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 になります。以下の操作は全て対応 OS のパソコンで行ってください。
- 旧バージョンの「NEO DENTALi」が入っていないパソコンにインストールする場合、手順 **1** は「次へ」ボタンでスキップし、手順 **2** へ進んでください。


1 登録データのバックアップと旧バージョンのアンインストール

1. インストールメディア (DVD) から、VupSetup.exe を実行します。



※実行のダイアログが立ち上がらない場合は、フォルダを開き VupSetup.exe をダブルクリックしてください。

2. 登録していた症例写真やテキストのバックアップをします。

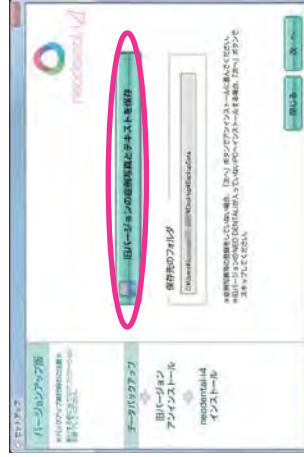

「旧バージョンの症例写真とテキストを保存」ボタンを押してください。デスクトップにデータが保存されたら次の画面に移ります。

※旧バージョンの NEO DENTALi が入っていない場合、バックアップするデータが無い場合は「次へ」ボタンでスキップしてください。

3. 旧バージョンのアンインストールを行います。




●旧バージョンの NEO DENTALi をアンインストールします。

●旧バージョンの USB キードライバをアンインストールします。

アンインストール後「PC を再起動してください」と出ますが、ここでは再起動せず、「OK」ボタンを押し、「次へ」ボタンを押し次の手順に進んでください。

※旧バージョンの NEO DENTALi や USB キードライバが入っていないパソコンにインストールする場合は、「次へ」ボタンでスキップしてください。

2 ソフトのインストール

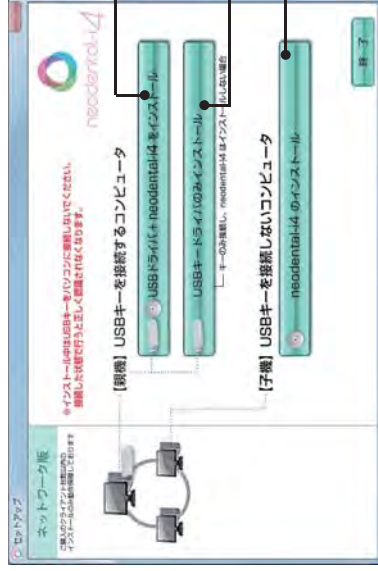


※USB キーを接続しているパソコンにのみ USB キードライバが必要です。

A 「neodental-i4」と「USB キードライバ」をまとめてインストールします。

B 「neodental-i4」のみをインストールします。


C 「USB キードライバ」のみをインストールします（右ページ**3**の画面へ移行します）。

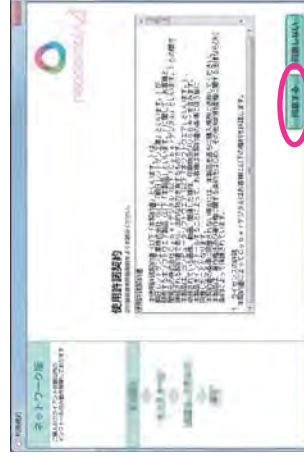

A または **B** のボタンを押すと「使用許諾契約」の画面に移行します。内容を確認し、「同意する」ボタンを押してください。



インストールする場所を確認し、
[インストール] ボタンを押します。

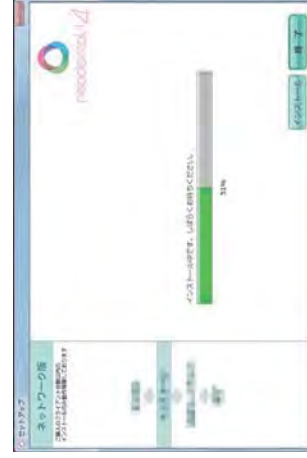

インストールが開始されます。



インストールが100%になると、ショートカットアイコンを作成の確認ダイアログが表示されます。作成する場合「はい」を押してください。
引き続き、スタートメニューにショートカットを作成するダイアログが表示されます。作成する場合「はい」を押してください。




インストール完了の画面が表示されましたら、USB キードライバもインストールする場合は「次へ」を押してください。

「neodental-i4」のみのインストールの場合、終了画面に移りますので、[終了] ボタンを押してください。



3 USB キードライバのインストール (USB キー接続 PC のみ)

[キードライバのインストール] ボタンを押すとインストールが開始されます。

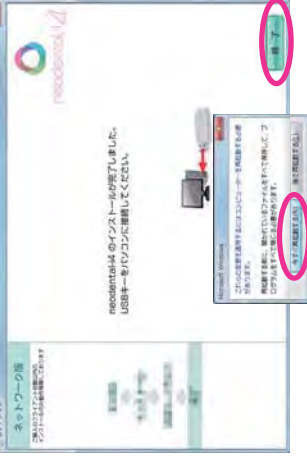


インストールが終了すると、終了画面が表示されます。

[終了] ボタンで画面を閉じると、再起動の確認ダイアログが表示されますので、必ず再起動してください。

4 USB キーのバージョンアップ

1. パソコンに「メモリスティック」を接続します。

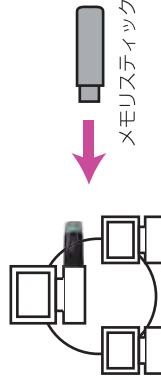


- 必ず USB キードライバの入っているパソコンに USB キーを接続して行ってください。
- 「メモリスティック」はネットワーク内のどのパソコンに接続してもかまいません。
- USB キーのバージョンアップはネットワーク内の 1 台のパソコンで 1 回実行していただけで完了します。全てのパソコンで行う必要はありません。

2. 「メモリスティック」内のプログラムを実行します。



「メモリスティック」内にある「usb バージョンアップ.exe」をダブルクリックします。

3. USB キーのバージョンアップを行います。

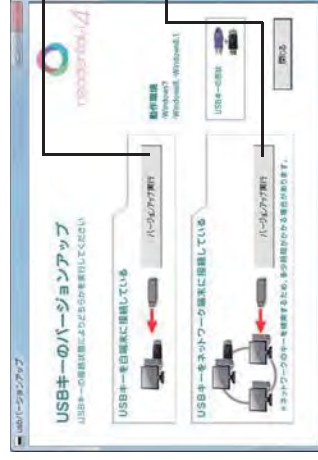


● USB キーが自端末に接続されている場合

上の「バージョンアップ実行」ボタンを押します。

● USB キーが他のパソコンに接続されている場合


下の「バージョンアップ実行」ボタンを押します。

USB キーが接続されているパソコンの IP アドレスを入力します。

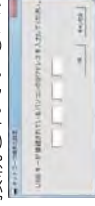

正常にバージョンアップが完了すると「処理を完了しました。」というメッセージが表示されますので、「OK」を押します。

4. 「メモリスティック」をパソコンから取り外します。

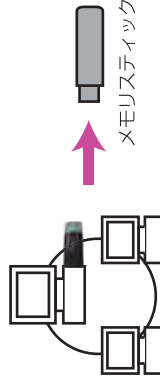

- 「USB バージョンアップ」でのバージョンアップは 1 回のみ実行可能です。

■ よくある質問（バージョンアップ編）

Q 手順①でバックアップした旧バージョンのデータは、自動的に「neodental-i4」に反映されますか？

A いいえ。「neodental-i4」はメニュー数や写真登録パネル数が増えた仕様により、バックアップデータをそのまま反映することは出来ません。
お手数ですが、デスクトップに保存されたデータを、操作マニュアルP16～を参照して、改めて登録をお願いします。尚、1台のパソコンに登録すれば、他のパソコンには設定情報のコピー（操作マニュアルP7～参照）で登録情報がコピーできます。

Q 旧バージョンを WindowsXP で利用していましたが、Windows7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 に入れ替えたので、「neodental-i4」バージョンアップ版を購入しました。バージョンアップの手順を教えてください。

A 手順①は「次へ」ボタンでスキップし、手順②からインストールしてください。
登録していた症例写真等は、旧バージョンの「設定」→「バックアップ」から外部メモリ等に保存し、お手数ですが改めて症例登録をお願い致します。

Q パソコンを入れ替えたので、「neodental-i4」を再インストールしたいのですが、バージョンアップ版と同じDVDでインストールしていいですか？

A はい。手順①は「次へ」ボタンでスキップし、手順②へ進んでください。登録した症例写真等は、他のパソコンから設定情報のコピー機能を使うか、古いパソコンからバックアップして外部メモリ等に保存し、新しいパソコンでリストアしてください。（操作マニュアルP20 参照）

■ 動作環境

OS	Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10、Windows11
CPU	2 コア以上
メモリ	単独起動の場合 2GB 以上（他のソフトと同時起動の場合は4GB以上推奨）
モニター	1024 × 768 以上の Windows 対応ディスプレイ 24bitカラー以上（推奨32bitカラー）
ハードディスク	インストール用として C ドライブに 3GB 以上の空き容量 （アニメキヤプチャ保存用空き容量は別途必要）
ドライブ	DVD-ROM が読み可能なドライブ（インストール時に必要）
ポート	USB ポート

※ネットワーク版はネットワークが正しく接続されている場合に限り有効です。

※Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。